


SleepDoc Porti® 7 – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

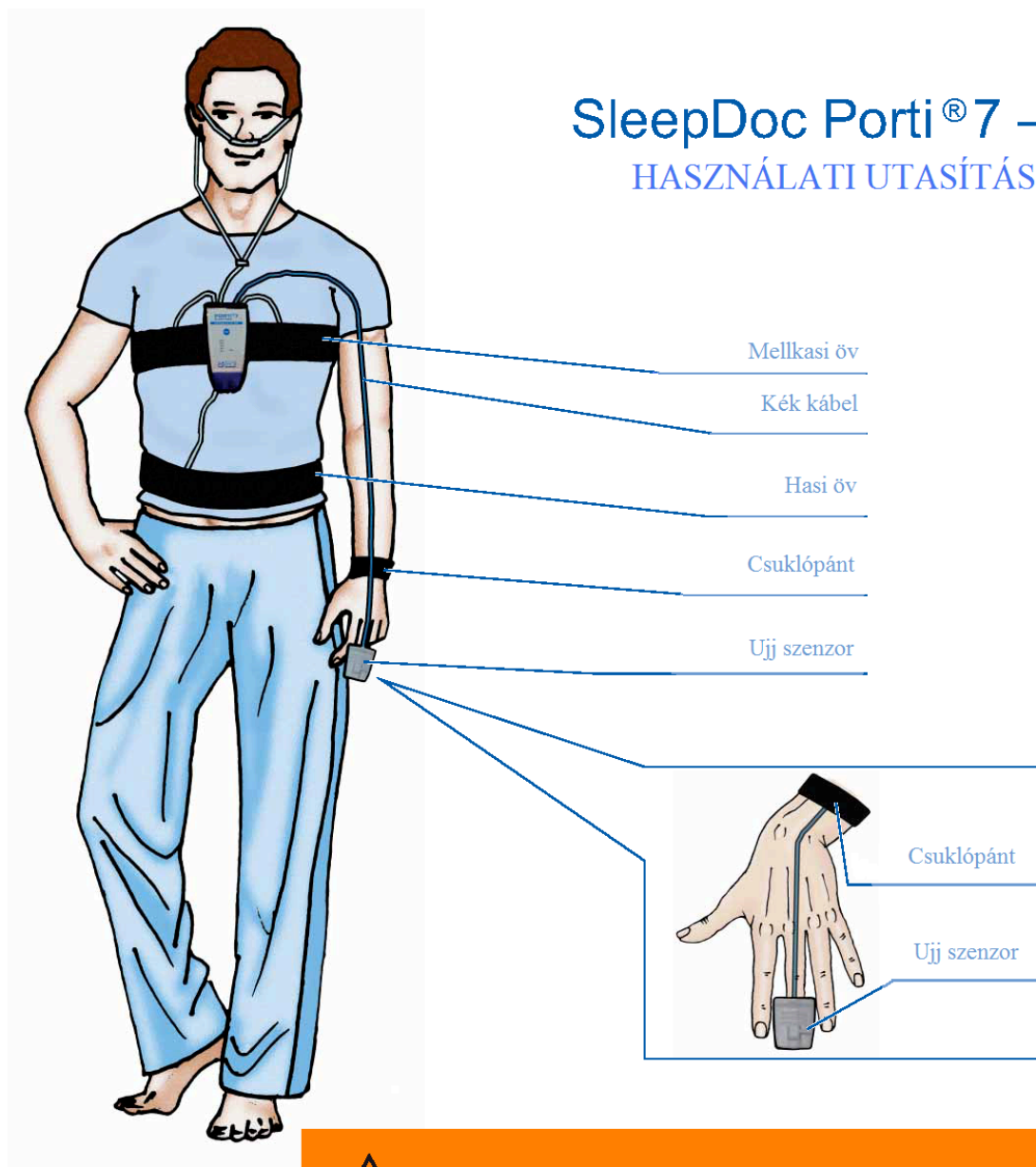

Figyelem!

A készüléket ne érje víz, az ujj szenzort kézmosás után helyezze fel.
Kérem kövesse az utasításokat!

SleepDoc Porti® 7 –

Páciens Útmutató

1. A Porti készüléket helyezze az alváshoz viselt ruhán kívül. A készüléknek a mellkas közepén, függőleges pozícióban kell elhelyezkednie. Használja a nyakpántot segítségképpen és kösse be a mellkasi tépőzárás övet. Az öv ne legyen túl szoros, csak annyira húzza meg, hogy biztonságos és kényelmes viselet legyen az éjszaka folyamán.

2. Kösse be a hasi övet a külön hasi érzékelővel együtt a köldök magasságában.

Figyelem! A hasi öv úgy helyezkedjen el, hogy a nyomást mérő szenzor egység az öv belső felszínén a test felé forduljon. (Hasonlóan a mellkasi övhöz.)

3. Amennyiben lehetséges a középső ujján vágja rövidre a körmöt. Gondoskodjon a körömlakk eltávolításáról. Az ujj a szürke borítójú szenzorban helyezkedjen el úgy, hogy a köröm jelzés a kéz hát irányába essen, majd rögzítse a kábelt a csukló magasságában a tépőzárás csuklópánttal

4. Illessze az orrszonda tűskéit az orrhoz, majd a fül mögött vezesse el a csövet az ábra szerint. Amennyiben szükséges rögzítse az orrszondát kétoldalt az arcon kis ragtapasszal. Kapcsolja a szondavégét a Porti egység kék csatlakozó tömlőjéhez.

Amennyiben maszkot használ, csatlakoztassa a CPAP végét. Távolítsa el a maszk kis dugóját és illessze erősen a fehér műanyag csatlakozóta maszk nyílásához. (Maszk használata esetén nem lesz szüksége az orrszondára.)

5. A felvétel automatikusan indul a klinika által korábban meghatározott időpontban.

6. Mindegyik LED világítani fog. Az ujj szenzor pontos illeszkedése esetén a piros LED kialszik. A felvétel közben a zöld LED 4 másodpercenként kialszik, a mérési tevékenység következtében.

Hiba üzenet	Ok	Megoldás
Zöld LED nem alszik ki	Akku lemerült	Akkut töltsse fel
Piros LED villog	Nem megfelelő a pulzus jel	Ellenőrizze az ujj szenzort, kábelt

A következő reggel

Helyezze vissza akészüléket és a tartozékokat a dobozba. Kérjük vigye vissza a készüléket a Medios Orvosi Központba a megbeszélt időpontban.